



# Kurzbedienungsanweisung

- ① **Drehzahltaaste:** Motordrehzahl oder Kühlmittelmenge regulieren.  
Kurz drücken – bei gelber Statusanzeige Funk-Fußanlasser.
- ② **Kühlmitteltaaste:** Für die Kühlmitteltaaste können 2 Betriebsarten eingestellt werden. Abhängig von der eingestellten Betriebsart hat die Kühlmitteltaaste die folgenden Funktionen:  
Kurz drücken – Kühlmittelfördermenge ein-/ausschalten *oder*  
kurz drücken – Kühlmittelfördermenge einstellen von 0 bis 110 ml/s (4 Stufen).  
Lang drücken – manuelle Spülfunktion aktivieren.
- ③ **Programmtaaste:** Kurz drücken – Programmschritt vorwärts.  
Lang drücken – Programmschritt rückwärts.
- ④ **Motordrehrichtungtaaste:** Motordrehrichtung einstellen.

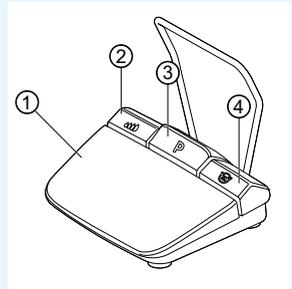

## Schlauchset anschließen

1. Schlauchklemme ⑦ schließen.
2. Kühlmittelschlauch ① am Hand- oder Winkelstück befestigen.
3. Clips ② enganliegend an der Motorleitung befestigen.
4. Schlauchadapter ③ einrasten.
5. Schlauch in Pumpe einlegen (ca. 1 cm Abstand zwischen Konnektor und Pumpeneingang ④ und Pumpe verriegeln).
6. Einstechnadel ⑥ einstechen.
7. Schlauchklemme ⑦ öffnen.

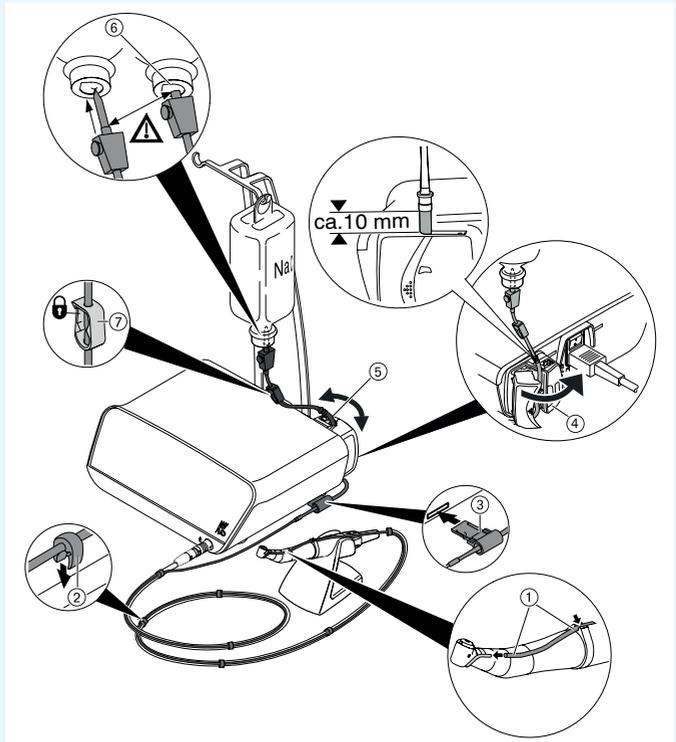

### Hinweis


Nur bei Glasflaschen die Belüftung an der Einstechnadel ⑥ öffnen.



### VORSICHT

Diese Kurzbedienungsanweisung beinhaltet ausschließlich die wesentlichen Bedienungsfunktionen. Vor der ersten Inbetriebnahme sowie bei Bedienung durch Personen, die nicht im Umgang mit diesem Medizinprodukt vertraut sind, ist unbedingt die zum Lieferumfang gehörende Gebrauchsanweisung zu beachten.



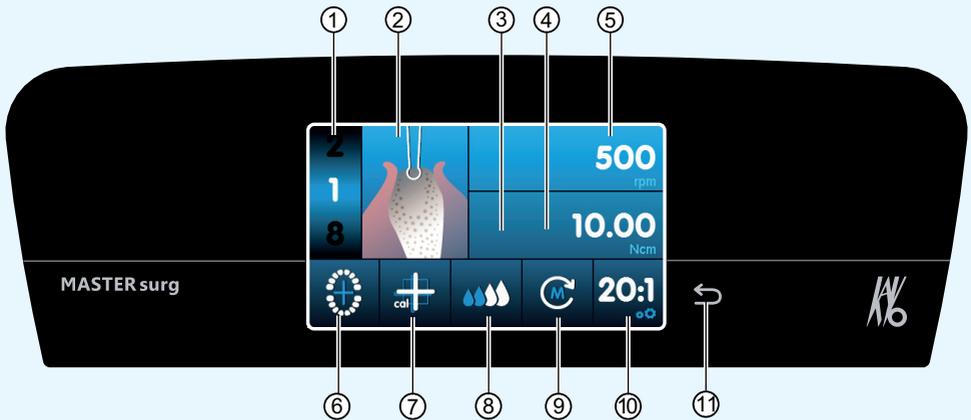

- |  |   |
|--|---|
| ① Programmschritt (1 bis max. 10)  | ⑦ Aktivierung One-Touch-Kalibrierung    |
| ② Darstellung der Aktivität  | ⑧ Einstellung der Kühlmittelfördermenge |
| ③ Maximal aufgetretenes Drehmoment<br>(wird nicht bei allen Aktivitäten angezeigt) | ⑨ Motordrehrichtung                     |
| ④ Drehmomentbegrenzung   | ⑩ Übersetzung                           |
| ⑤ Drehzahl   | ⑪ Zurücktaste                           |
| ⑥ Statusanzeige Funk-Fußanlasser / Eingabe<br>Implantatposition                    |   |

## Parameter und Aktivität ändern

### Geräteeinstellung auswählen

Zurücktaste ⑪ kurz drücken, um in das Chirurgieprogramm oder in die Programmauswahl zu gelangen.

Lang drücken, um Geräteeinstellungen aufzurufen.

### Parameter oder Aktivität auswählen bzw. ändern

Funktionen ④ und ⑤: Veränderbar durch Schieben des Reglers nach rechts oder links, oder durch Antippen der +/- Symbole.

Funktionen ①, ⑧, ⑨ und ⑩: Direkt veränderbar durch Antippen.

Funktionen ②, ⑥ und ⑦: Veränderbar innerhalb des erscheinenden Dialogfensters.

Speicherung erfolgt automatisch beim Verlassen des Parameters oder der Aktivität.

### Anzahl der Programmschritte begrenzen

Programmschritt nach der letzten gewählten Aktivität antippen und Flaggensymbol auswählen.

### Begrenzung der Programmschritte aufheben

Programmschritt mit Flaggensymbol wählen und neue Aktivität zuweisen.

### Drehmomentanzeige und Dokumentation

Nur bei eingeschalteter Dokumentationsfunktion wird das Drehmoment in der Aktivität „Implantat setzen“ als Grafik angezeigt und auf der SD-Karte gespeichert.

