



Beknopte bedieningshandleiding

- ① **Toerentalknop:** Motor starten / toerental verhogen.
- ② **Koelmiddelknop:** Voor de koelmiddelknop kunnen 2 modi ingesteld worden. Afhankelijk van de ingestelde modus heeft de koelmiddelknop de volgende functies:
 Kort indrukken – toevoerhoeveelheid koelmiddel aan/uit schakelen of kort indrukken – toevoerhoeveelheid koelmiddel instellen van 0 tot 110 ml/s (4 niveaus).
 Lang indrukken – manuele spoelfunctie activeren
- ③ **Programmaknop:** Kort indrukken – Programmastap voorwaarts
 Lang indrukken – Programmastap achterwaarts
- ④ **Knop motordraairichting:** Motordraairichting instellen.

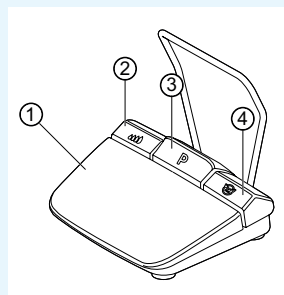

Slangset aansluiten

1. Slangklem ⑦ sluiten.
2. Koelmiddelslang ① aan het hand- of hoekstuk bevestigen.
3. Clips ② dicht tegen de motorleiding aan bevestigen.
4. Slangadapter ③ vastklikken.
5. Slang in de pomp leggen (ongeveer 1 cm afstand tussen de connector en de ingang van de pomp ④ en de pomp vergrendelen).
6. Insteeknaald ⑥ insteken.
7. Slangklem ⑦ openen.

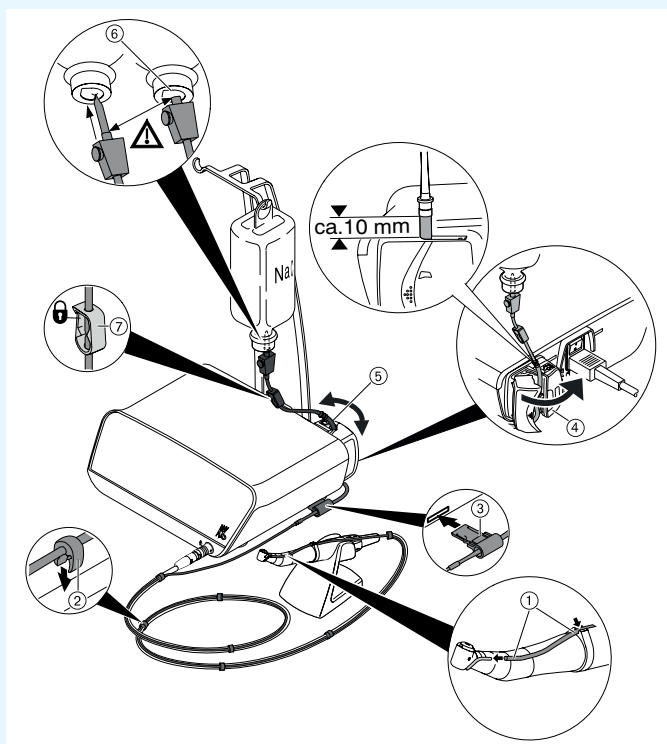

Instructie

Alleen bij gasflessen de ventilatieopening bij de insteeknaald ⑥ openen.




OPGELET

Deze beknopte bedieningshandleiding omvat uitsluitend de elementaire bedieningsfuncties. Voor de eerste ingebruikname alsmede bij bediening door personen, die niet vertrouwd zijn met dit medicijn, moet onherroepelijk de bijgeleverde gebruiksaanwijzing gelezen en nageleefd worden.



KaVo. Dental Excellence.

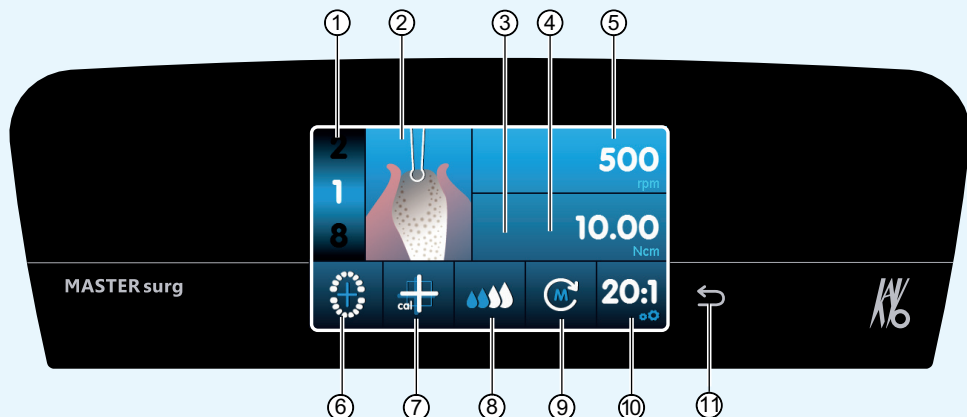

- | | |
|---|---------------------------------------|
| ① Programmastap (1 tot max. 10) | ⑦ Inschakelen one-touch-kalibratie |
| ② Weergave van de activiteit | ⑧ Instelling van het koelmiddeldebiet |
| ③ Maximaal opgetreden draaimoment
(wordt niet bij alle activiteiten weergegeven) | ⑨ Motordraairichting |
| ④ Draaimomentbegrenzing | ⑩ Overbrenging |
| ⑤ Toerental | ⑪ Toets „terug“ |
| ⑥ Statusweergave draadloze voetbediening / invoer
positie van implantaat | |

Parameters en activiteit wijzigen

Apparaatinstellingen selecteren

Toets „terug“ ⑪ kort indrukken om terug te keren naar het chirurgieprogramma of de programmakeuze.

Lang indrukken om de apparaatinstellingen te openen.



Parameters of activiteit selecteren of wijzigen

Functies ④ en ⑤: kunnen worden gewijzigd door de regelaar naar rechts of links te schuiven, of door aantippen van de +/- symbolen.


Functies ①, ③, ⑨ en ⑩: direct wijzigen door aantippen.

Functies ②, ⑥ en ⑦: kunnen binnen het verschijnende dialoogvenster worden gewijzigd.

Bij het verlaten van de parameters of de activiteit worden de gegevens automatisch opgeslagen.

Aantal programmastappen beperken

De programmastap na de als laatste gekozen activiteit aantippen en het vlagsymbool selecteren.

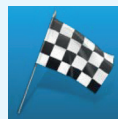

Beperking van de programmastappen opheffen

Programmastap met het vlagsymbool kiezen en een nieuwe activiteit toewijzen.

Draaimomentweergave en documentatie

Slechts wanneer de documentatiefunctie is ingeschakeld, wordt het draaimoment in de activiteit „Implantaat plaatsen“ als grafiek weergegeven en op de SD-kaart opgeslagen.



KaVo. Dental Excellence.