

Dental Excellence – doskonałość
w każdym obszarze stomatologii.



Wyposażenie gabinetu

Unity i lampy stomatologiczne, systemy komunikacji z pacjentem, mikroskopy stomatologiczne oraz dodatkowe urządzenia KaVo.



Instrumenty

Prostnice i kątnice stomatologiczne, turbiny, piaskarki oraz drobne urządzenia do wszystkich zastosowań, w tym diagnostyki, profilaktyki, stomatologii zachowawczej, chirurgii, endodoncji oraz konserwacji instrumentów.

Produkty, urządzenia i usługi przedstawione i opisane w tym katalogu mogą być dostępne tylko w wybranych krajach. Zamieszczone specyfikacje są zgodne z aktualną wiedzą obowiązującą w czasie ich publikacji. Firma KaVo Dental GmbH nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność koloru na ilustracjach, pomyłki lub błędy w druku oraz zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w broszurach w dowolnym momencie. Powielanie, także w części, jest dozwolone wyłącznie za zgodą firmy KaVo Dental GmbH.

PROPHYflex 4
Zmień zabieg w czystą przyjemność.



Focus Open 2018 Gold

Doskonały design urządzenia
KaVo PROPHYflex 4 dostał złotą nagrodę Focus Open 2018 Gold za wyjątkowy i przyszłościowy design. Jury doceniło sposób, w jaki urządzenie układa się w dłoni oraz za kolorystykę.

Trzy urządzenia w jednym: idealne rozwiązanie do zabiegów naddziąstowych i poddziąstowych.

Nowa piaskarka PROPHYflex 4 to wszechstronne urządzenie do wielu zastosowań. Można jej używać do pracy ze wszystkimi rodzajami zębów, wszystkich pacjentów i prawie w każdym wskazaniu, bez względu na to, czy chodzi o obszar nad- czy poddziąstowy.

Naddziąstowo.




Wygodnie leży w dłoni.

Ergonomię obsługi i swobodne, bezstresowe przeprowadzanie zabiegów można sobie zapewnić wybierając odpowiednią dla siebie długość rękojści.



Wszechstronność

Dwie kaniule naddziąstowe zapewniają wyjątkowo delikatne i bardzo wydajne czyszczenie. Do wyboru dwie dysze: standardowa i nowo dostępna dysza POWER o większej mocy przeznaczona do każdego zabiegu.

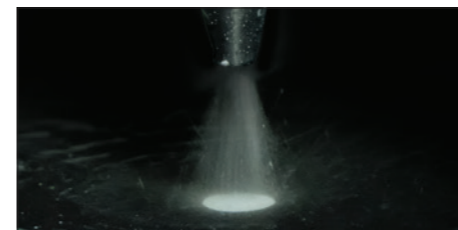

Skoncentrowany na czystej przyjemności.

Punktowe polerowanie ukierunkowanym źródłem powietrza wytwarzanym przez standardową dyszę PROPHYflex chroni strukturę zęba, jednocześnie znacznie redukując powstawanie mgiełki podczas polerowania.



Możliwość regulacji mocy.


Dzięki trzem poziomom regulacji można samodzielnie dostosować skuteczność czyszczenia, prowadząc je zarówno bez użycia proszku, jak i z maksymalną jego ilością.

Poddziąstowo.



Koniec z biofilmem.

Skoncentrowany strumień umożliwia wyjątkowo precyzyjną pracę, a dzięki zgłębnikowi WHO daje również idealny ogląd kieszonek.

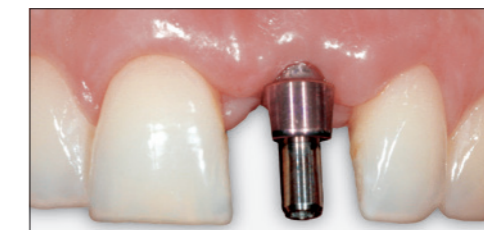

Skoncentrowany strumień zapewnia wszechstronne narzędzie.

Końcówka Perio służy do zastosowań poddziąstowych, ale może być również wykorzystywana do czyszczenia implantów, koron i mostów oraz usuwania przebarwień na odstąpiętych szyjkach zębowych.

Doskonała ergonomia jeszcze nigdy nie była tak wszechstronna...

Chcesz, aby codzienne zabiegi profilaktyczne były łatwiejsze, szybsze i dokładniejsze, a nawet przyjemniejsze podczas dłuższych wizyt? Nowa piaskarka PROPHYflex 4 firmy KaVo spełnia wszystkie te kryteria. Jest bardzo lekka, idealnie wyważona i ergonomicznie zaprojektowana, co umożliwia wygodną pracę.

Standardowa dysza PROPHYflex

Wysokie precyzyjne polerowanie powietrzem wytwarza zredukowaną ilość mgiełki, dzięki czemu podczas zabiegu można profilaktycznie usunąć w sposób delikatny biofilm i przebarwienia. Wąska dysza zapewnia dobrą widoczność podczas oczyszczania naddziąstowego.

Dysza PROPHYflex Perio

Opcjonalny zestaw Perio przeznaczony do przeprowadzania precyzyjnych i łagodnych zabiegów poddziąstowych, jak również czyszczenia mostów, implantów i koron.

Dysza POWER

Dysza POWER błyskawicznie usuwa nawet najbardziej uporczywe przebarwienia.



... a wszechstronność jeszcze nigdy nie prowadziła do takiego komfortu.

Ponieważ każdy lekarz, zabieg i pacjent różnią się, KaVo PROPHYflex 4 można dopasowywać do indywidualnych wymagań. Ty decydujesz o tym, czy będziesz czyścić okolice poddziąstowe czy naddziąstowe, czy chcesz zniwelować łagodne czy silne przebarwienia i który uchwyt wybrać.

Dostosowany do potrzeb.

Dwa uchwyty różnej długości pozwalają idealnie dopasować narzędzie do dłoni. Bardzo wygodne również w przypadku, gdy kilka osób korzysta z tej samej piaskarki. Wygodna praca nawet w trudno dostępnych miejscach, dzięki uchwytowi dyszy umożliwiającemu obrót o 360°.

Zachowaj spokój – pracuj bez wysiłku.

Niezwykle lekka, doskonale wyważona rękojeść z możliwością indywidualnego doboru długości zapewnia komfortową obsługę i bezstresowe przeprowadzenie zabiegu.

Gwarancja bezpieczeństwa.

Stabilna pozycja przy napełnianiu dzięki płaskiej podstawie zbiorniczka. Aby uniknąć przerywania zabiegu, pojemnik można napełnić wcześniej a następnie zamknąć go gumowym wieczkiem z oznaczeniem o wybranym wskazaniu.

Więcej oznacza lepiej.

Trzy stopnie regulacji – pierwszy z nich umożliwia irygację zębów w celu usunięcia pozostałości proszku. Poziom 2 i 3 pozwalają dostosować moc czyszczenia w zależności od pacjenta i wskazania.

Lepsza kompatybilność.

Podłączenie za pomocą złączki KaVo albo Sirona.

Rekomendowana przez lekarzy.


„Nowa piaskarka PROPHYflex 4 znacząco ułatwia moją codzienną pracę – idealnie leży w dłoni dzięki dwóm długościom uchwytu dyszy. Pozwala też kontrolować strumień proszku i wody, co doceniają również moi pacjenci”.

Tanja Wicharz

Specjalistka od profilaktyki i instruktorka szkoleń dotyczących prowadzenia gabinetu.



Najczystsza przyjemność.
Przed zabiegiem, w jego trakcie i po nim.

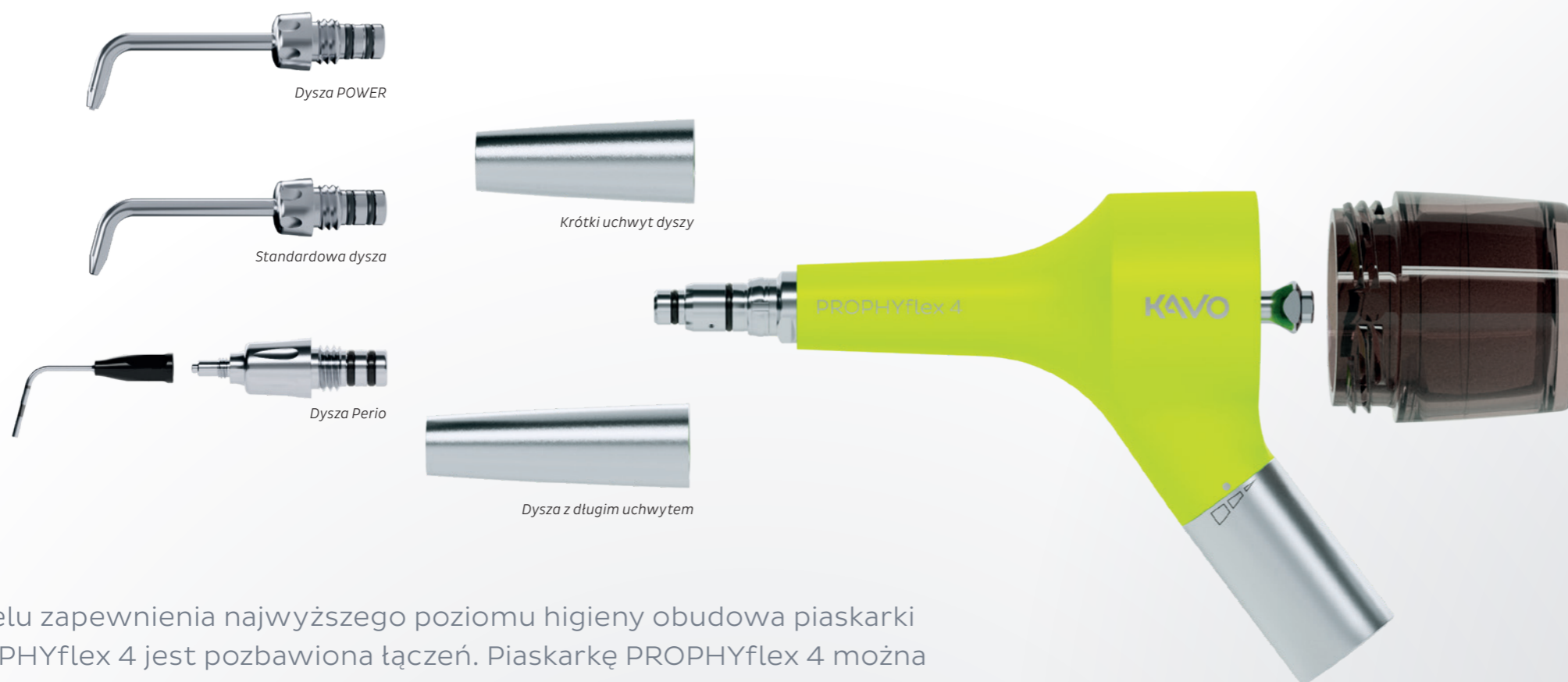

W celu zapewnienia najwyższego poziomu higieny obudowa piaskarki PROPHYflex 4 jest pozbawiona łączeń. Piaskarkę PROPHYflex 4 można łatwo rozłożyć na części, wyczyścić i zdezynfekować oraz wysterylizować.

Mój sposób
na największą
niezawodność.

„Po każdym zastosowaniu i przed każdym przygotowaniem należy podłączyć piaskarkę PROPHYflex 4 do szybkozłączki i płucać wodą przez minutę, a następnie odłączyć dopływ wody. Gwarantuje to, że w urządzeniu nie zostały resztki proszku, które mogłyby je zablokować. Pozostałości zalegające w urządzeniu PROPHYflex 4 można również wydmuchać, korzystając z pierwszego stopnia trzystopniowej regulacji. Przygotowanie piaskarki do kolejnego zabiegu nie zajmuje dużo czasu”.



Annett Preuß
Specjalista Sprzedaży, Dział
Instrumenty, KaVo Kerr Niemcy



PROPHYflex 4 jest dostępna w trzech intensywnych kolorach.

Prognoza na przyszłość:
mniejsze zapylenie.



Regulowana ilość proszku i stałe polerowanie ukierunkowanym źródłem powietrza zapewniane przez standardową dyszę PROPHYflex sprawiają, że praca z nią to czysta przyjemność – precyzyjne czyszczenie przy zminimalizowanym pyleniu i zoptymalizowana higiena.

Bezwzględna dla przebarwień,
łagodna dla zębów.



Równomierny rozkład energii wzdłuż powierzchni strumienia ma dwie zalety: im bardziej równomierny jest rozkład, tym skuteczniej przebiega czyszczenie, a struktura zębów jest lepiej chroniona.

* Działanie na szklisko proszku PROPHYpearls w porównaniu z konkurencyjną piaskarką wykorzystującą węglan wapnia. Sprawdzono na kompozycie SonicFill™.

Trzy rodzaje dysz zapewniają leczenie
dostosowane do każdego pacjenta.



Gwarancja dopasowania sposobu czyszczenia do pacjenta oraz inne zastosowania kliniczne dzięki trzem dostępnym dyszom i 3-stopniowej regulacji PROPHYflex 4.

Nie marnuj czasu:
zamykane pojemniki na proszek.



Pojemniki na proszek z zamykanym wieczkiem: idealnie nadają się do zabiegów, w których ilość proszku musi być zgodna ze wskazaniem. Wystarczy przymocować napełniony wcześniej pojemnik i rozpocząć pracę.


Liczy się też to, co jest w środku: kolekcja proszków dla PROPHYflex 4.

PROPHYpearls, PROPHYflex i PROPHYflex Perio to proszki idealnie nadające się do stosowania w połączeniu z piaskarką PROPHYflex 4, umożliwiające dokładne, a zarazem delikatne czyszczenie.




Proszek KaVo PROPHYpearls: delikatna skuteczność.

- Wskazania: skuteczne usuwanie przebarwień, osadu i biofilmu.
- Substancja czynna: węglan wapnia o ziarnistości 60-70 µm, biodegradowalny, nie zawiera soli, cukru ani glutenu.
- Najważniejsze informacje: okrągły kształt i jednolity rozmiar umożliwiają optymalne czyszczenie przy minimalnej abrazji; dostępny w czterech smakach i dwóch wariantach neutralnych.

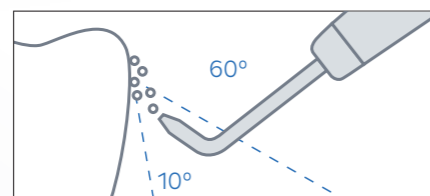


Proszek KaVo PROPHYflex: większa ścieralność.

- Wskazania: szybkie usuwanie przebarwień, osadu i biofilmu.
- Substancja czynna: dwuwęglan sodu o ziarnistości 60-70 µm, rozpuszczalny w wodzie.
- Najważniejsze informacje: prosty i szybki zabieg w czterech możliwych smakach.

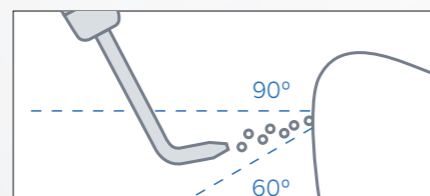

Tylko jedno urządzenie w gabinecie: zabiegi w obszarze poddziąstwowym z wykorzystaniem piaskarki PROPHYflex 4.

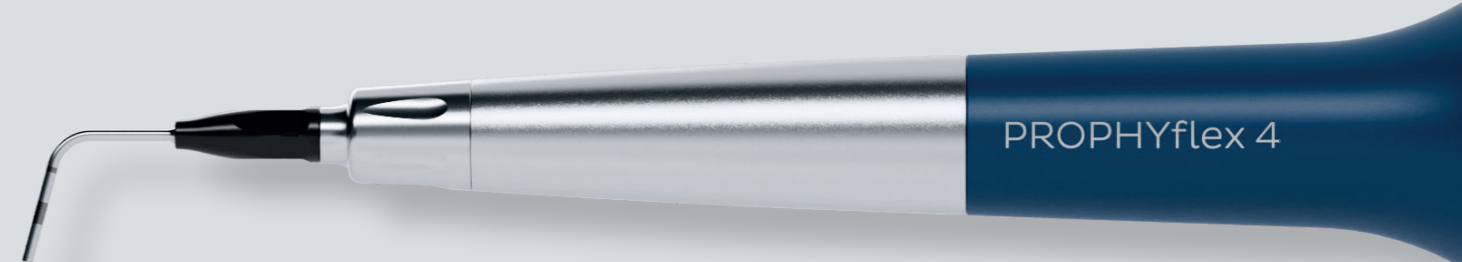

Dysza Perio i proszek Perio do zabiegów w obszarach poddziąstwowych.


Dzięki PROPHYflex 4 nie ma już konieczności korzystania z innego urządzenia podczas przechodzenia z obszaru poddziąstwowego do naddziąstwowego lub czyszczenia implantów. Wystarczy zamocować końcówkę Perio, wypelnić pojemnik proszkiem Perio, wybrać właściwy poziom mocy – i gotowe.

- Bezpieczne, ukierunkowane czyszczenie kieszonek za pomocą stabilnej, cienkiej końcówki Perio z oznaczeniem głębokości.
- Doskonała dostępność dzięki dobrej widoczności i smukłemu kształtowi.
- Higieniczne końcówki, wielokrotnego użycia: każdą można przygotować do 10 cykli sterylizacji.



Proszek KaVo PROPHYflex Perio: do zastosowań pod- i naddziąstwowych.

- Wskazania: skuteczna kontrola biofilmu w kieszonek przyzębnych oraz czyszczenie koron, mostów i implantów.
- Substancja czynna: drobny proszek glicynowy (18-22 µm) chroniący dźnięta.
- Najważniejsze informacje: delikatny i nieabrazyjny, do skutecznego czyszczenia kieszonek oraz implantów w zastosowaniach naddziąstwowych.

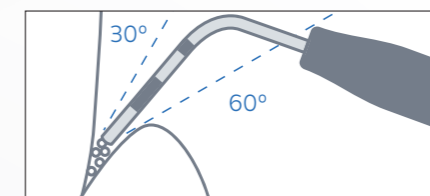

Zabiegi przy pomocy piaskarki KaVo PROPHYflex 4 są kluczowym elementem programu KaVo Kerr „Świat pełen uśmiechu”.



Uśmiech rodzi się z czystego szczęścia: system piaskowania firmy KaVo stanowi fundament prowadzonego przez firmę KaVo Kerr programu „Świat pełen uśmiechu”. Ergonomiczna i łatwa w regulacji piaskarka KaVo PROPHYflex 4 idealnie współgra z proszkami PROPHYpearls, PROPHYflex oraz zestawem Perio PROPHYflex i proszkiem Perio.

Zadowolenie z prowadzenia zabiegów profilaktycznych jest możliwe również dzięki innym produktom KaVo i Kerr: od przygotowania pacjenta w celu osiągnięcia najlepszej widoczności, przez produkty do delikatnego i dokładnego skalingu i rozwiązania do polerowania zębów, aż po innowacyjne urządzenia do wczesnego wykrywania próchnicy bez konieczności stosowania promieni rentgenowskich.

Wszelkie informacje, materiały wideo i aktualności można znaleźć na stronie: www.kavo.com/pl/PROPHYflex4



Optymalne przygotowanie pacjenta dzięki retractorowi Kerr OptiView™.

Elastyczna trójwymiarowa budowa retractora OptiView firmy Kerr umożliwia jego szybkie i wygodne zakładanie i zdejmowanie. Równomierne odciągnięcie warg i policzków zapewnia doskonałą widoczność i swobodny dostęp do jamy ustnej. Umożliwia nieprzerwane i skuteczne wykonywanie czynności, nawet podczas dłuższych zabiegów, zapewniając wygodę zarówno pacjentom, jak i lekarzom.



Skuteczny skaling dzięki końcówkom SONICflex firmy KaVo.

Niezależnie od rodzaju zabiegu system SONICflex umożliwia szybką i łatwą wymianę końcówki, komfortowy i łagodny przebieg dla tkanek, jak również mniejsze nagrzewanie i łagodną oscylację we wszystkich wskazaniach.



System KaVo gwarancją łatwego piaskowania.

System czyszczenia zębów firmy KaVo umożliwia skuteczne piaskowanie: nowa, ergonomiczna i łatwa w regulacji piaskarka KaVo PROPHYflex 4 z dedykowanym proszkiem PROPHYpearls i proszkiem PROPHYflex lub zestawem Perio PROPHYflex i proszkiem Perio, daje powód do uśmiechu przy każdym zastosowaniu, zarówno stomatologom, jak i pacjentom.



Skuteczne polerowanie zębów dzięki rozwiązaniom firmy KaVo Kerr.

Współpraca KaVo i Kerr – trzy kątnice KaVo SMARTmatic do leczenia profilaktycznego w połączeniu z produktami firmy Kerr: gumkami Pro-Cup™ służącymi do nakładania pasty profilaktycznej Cleanic™ bez rozpryskiwania przy pomocy praktycznych klipsów Propy Clips – umożliwia wyjątkowo skuteczne polerowanie zębów.



Przeznaczona do diagnostyki próchnicy kamera DIAGNOcam firmy KaVo.

Korzystając z kamery DIAGNOcam firmy KaVo we wczesnym wykrywaniu próchnicy można w łatwy sposób uzyskać bardzo dokładny obraz, przeprowadzając transiluminację zębów bez konieczności stosowania promieni rentgenowskich. Dzięki doskonałej jakości obrazom łatwiej uzyskać akceptację zaproponowanego planu leczenia.